



N'oubliez pas de visionner le vidéo  
quand vous voyez ce symbole




# Systeme entéral ENFit

Ne pas modifier ou distribuer


# Qu'est-ce qui change?

- ▶ Plusieurs produits que vous utilisez pour le gavage vont changer pour un nouveau système qui s'appelle ENFit
- ▶ Ceci inclut: les seringues, les tubes/sondes nasogastriques ou nasojéjunales, les extensions de bouton de gastrostomie et sacs de gavage
- ▶ Avec l'ancien système, il fallait pousser le connecteur pour le faire entrer dans l'embouchure, alors que maintenant ceci est fait en effectuant une rotation.

Ancienne connection

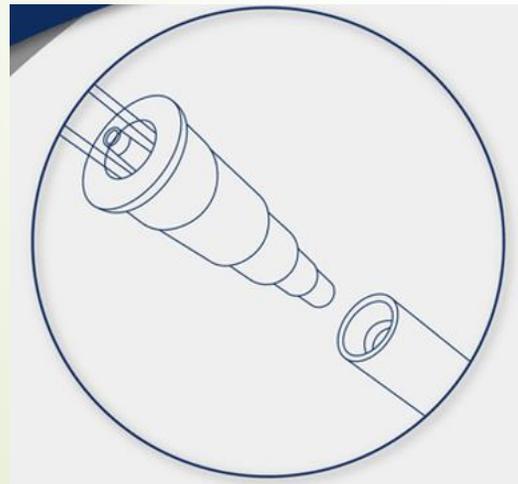

Nouvelle connection

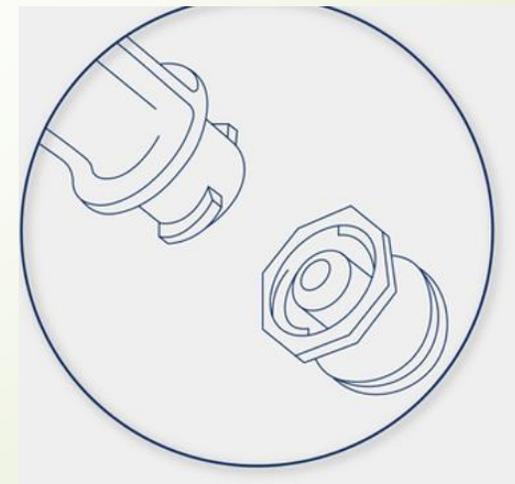

# Seringues

Les seringues ENFit viennent avec deux embouts différents:

- Les seringues de 1 mL et 3 mL ont un embout spécial pour les petites doses de médicaments (appeler embout à faible dose)
- Les seringues de 6, 12, 20, 35 et 60 mL ont un embout standard

Embout  
à faible  
dose




Embout  
standard



# Seringue avec embout à faible dose

- Ces seringues ont été conçues pour assurer la précision des doses de médicaments même lorsque les volumes sont très petits
- Il y a deux composantes à cet embout:
  - L'embout
  - L'espace qui entoure l'embout

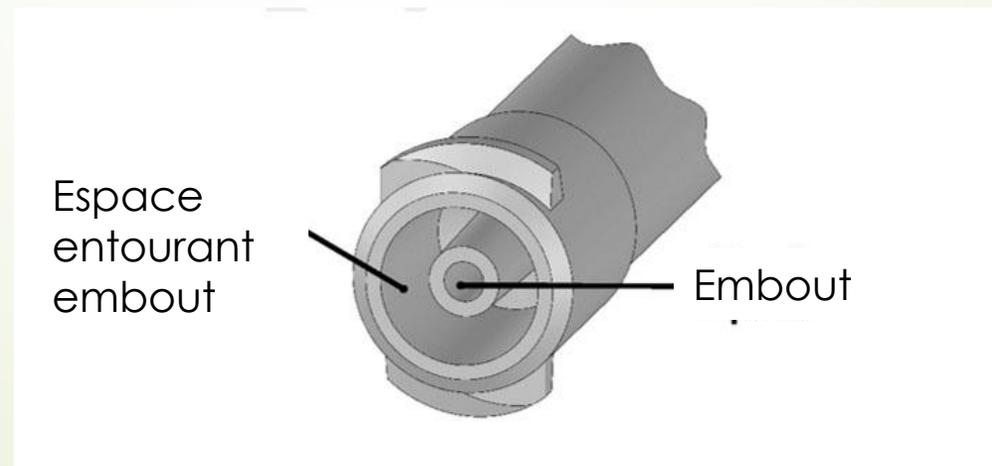


# Volume des seringues


- Les nouvelles seringues ENFit sont disponibles dans des formats différents des anciennes seringues:

Ancien volume	Nouveau volume
5 mL	6 mL
10 mL	12 mL
	Nouveau: 20 mL
30 mL	35 mL
50 mL	60 mL


# Connexion des seringues

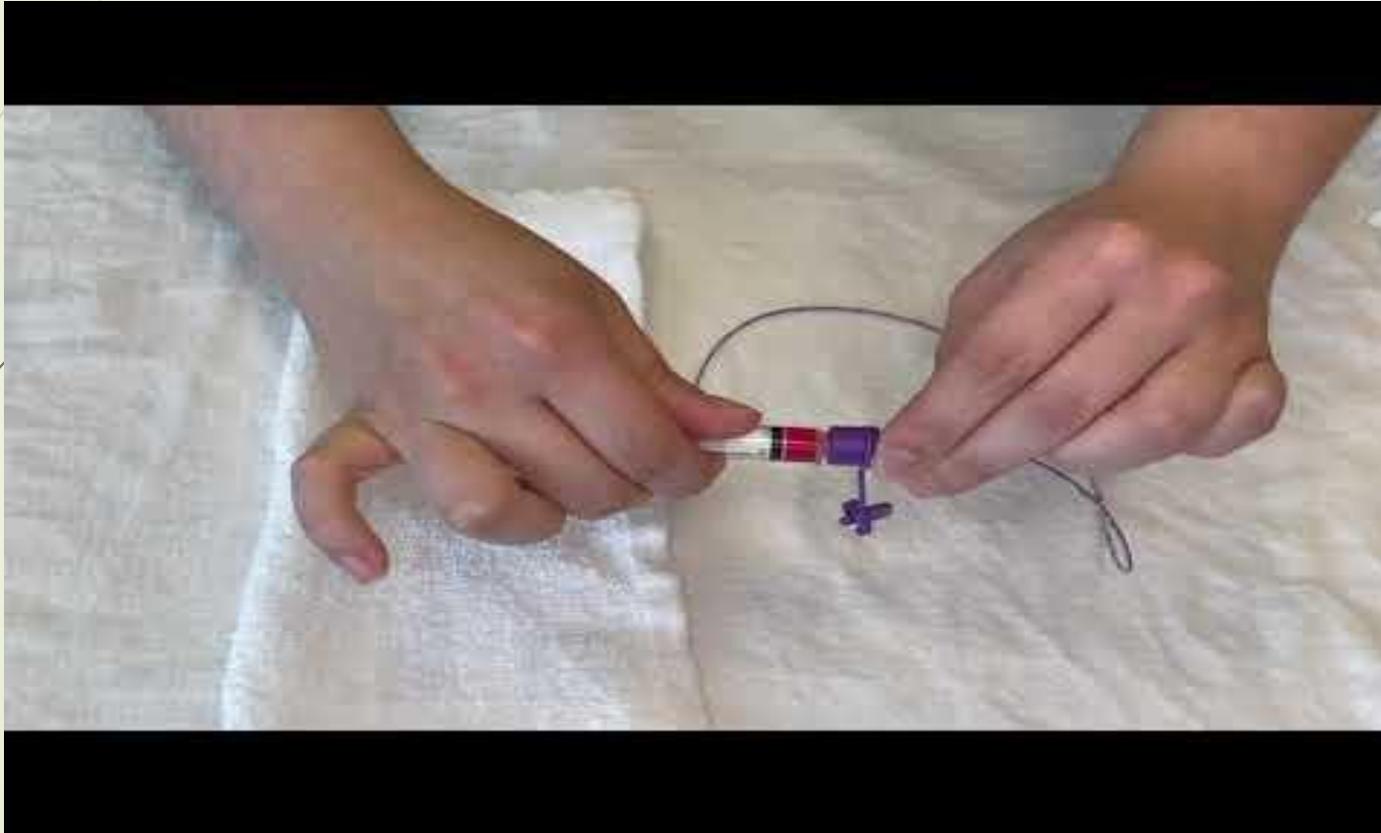

Utilisez ce lien pour regarder la vidéo:  
<https://youtu.be/mETxYA8e5tg>

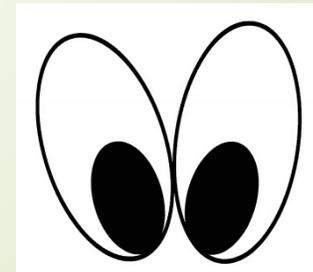


# Connexion du sac de gavage

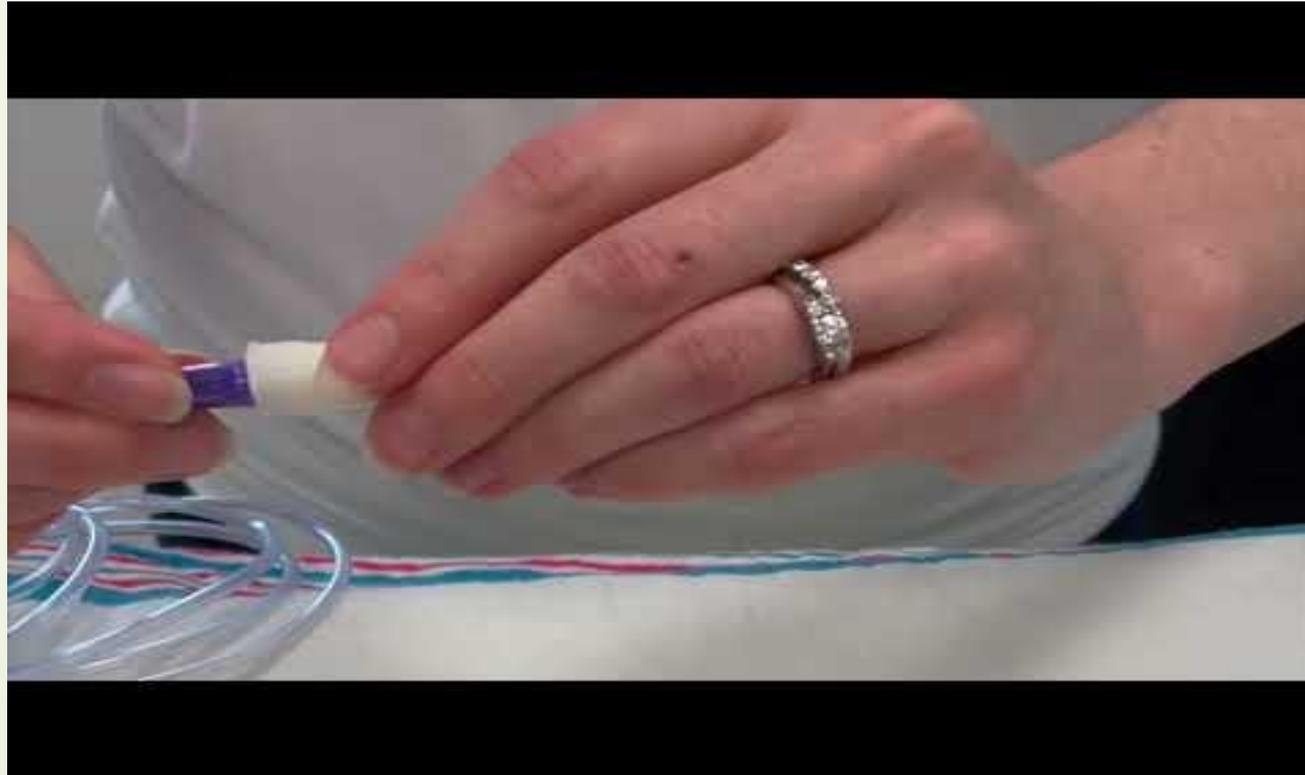

Utilisez ce lien pour regarder la vidéo:

<https://youtu.be/9KapX71U3Bw>

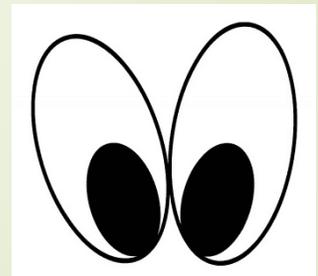

# Comment préparer les médicaments

- Il est très important, lorsque vous prélevez des médicaments avec la seringue avec embout à faible dose, de ne pas laisser un excès de médicament dans l'espace qui entoure l'embout
- Il y a une technique très simple et efficace pour enlever cet excès



Utilisez ce lien pour regarder la vidéo:  
<https://youtu.be/T46JQCfMgK0>



# Comment nettoyer la connection ENFit

Il est important de bien bien nettoyer l'embout du tube afin d'assurer la sécurité de toute connection et pour éviter des blocages.



Utilisez ce lien pour regarder la vidéo:

<https://youtu.be/XImLX3xKg0g>





# Questions

- ▶ Si vous avez des questions, contactez votre infirmière primaire du programme d'alimentation entérale à domicile ou le département de nutrition clinique